

دستگاه جرمگیر اولتراسونیک MULTIPIEZO WHITE مکترون



طراحی ارگونومیک صفحه لمسی دستگاه مولتی پیزو مکترون، این امکان را برای دندانپزشک فراهم می نماید تا کنترل بهتر و سریع تری بر روی عملکرد درمانی خود داشته باشد .
این صفحه لمسی با توجه به دارا بودن سطحی صاف به راحتی قابل تمیز کردن و ضدعفونی می باشد.
با این دستگاه شما قادر به انجام انواع درمان های زیر می باشید :

- اندو
- پریو
- ترمیمی
- Extraction دندان و پروتز


از خصوصیات منحصر به فرد این دستگاه حالت **soft mode** بوده که با کنترل لرزش دستگاه، درد دهان و دندان را در بیماران دارای حساسیت های دندانی، کاهش می دهد .

دستگاه Multipiezo White مکترون در یک نگاه:

- صفحه نمایش بزرگ لمسی
- دارای سطح یکپارچه برای تمیز و ضدعفونی نمودن آسان
- هندپیس اولتراسونیک LED دار با قابلیت چرخش 360 درجه و قابل اتوکلاو
- دارای دو مخزن 500 میلی لیتر اختصاصی جهت انتخاب مایع شستشو (آب و سرم)
- قابلیت تنظیم قدرت دستگاه در 7 حالت
- قابلیت تنظیم میزان جریان مایع شستشو در 7 حالت
- قابلیت اتصال به آب یونیت
- دارای حالت **Soft Mode**
- امکان استفاده برای انواع درمان ها


حالت Soft Mode

دستگاه مولتی پیزو مکترون دارای حالت soft mode بوده که در بیماران دارای حساسیت های دندانی برای کاهش علائم نامطلوب درمان های اولتراسونیک، دندانپزشک می تواند با انتخاب این مد بدون کاهش توان خروجی دستگاه، با لرزش ملایم تر سر قلم ها اقدام به درمان نماید .

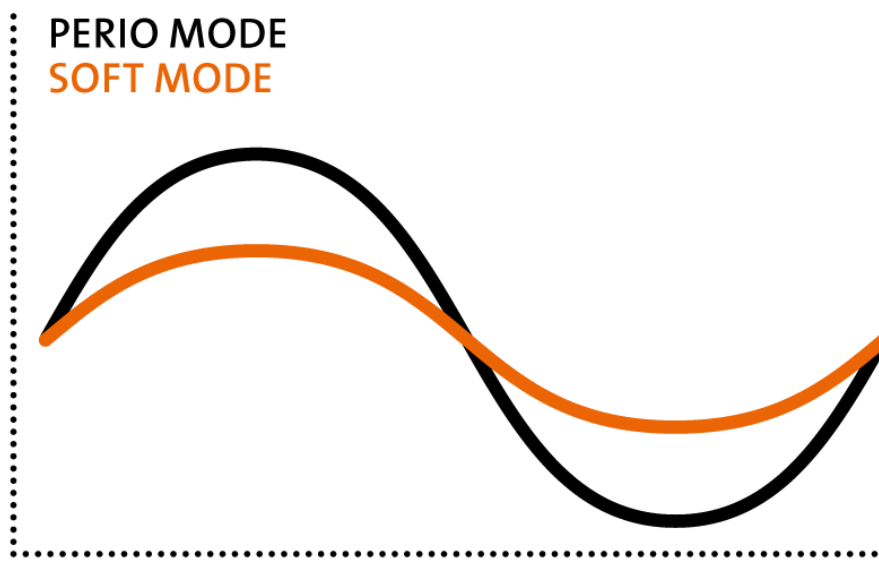

حالت Pulse Mode

در این مُد، امواج سینوسی شکل اولتراسونیک، به حالت زیر درآمده (نمودار نارنجی رنگ) و این امواج ضربه ای انجام Extraction دندان و پروتز را بهبود می بخشد.

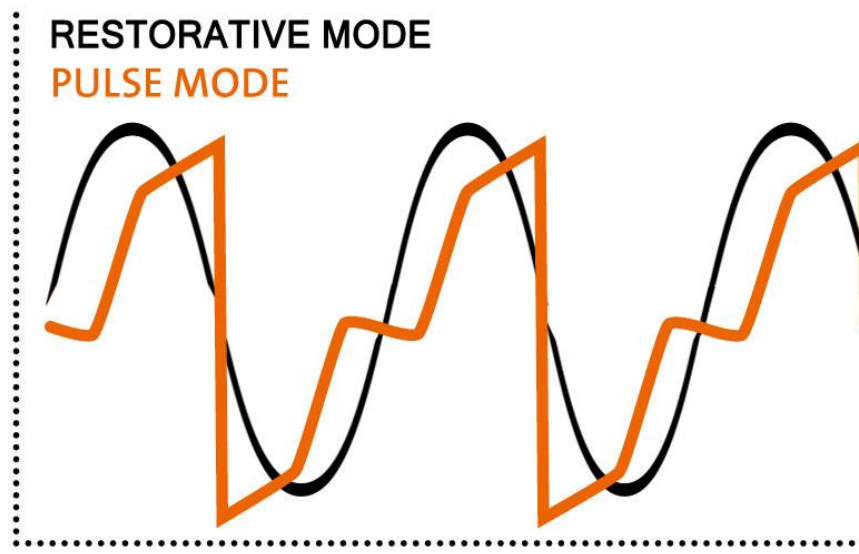

سیستم ایریگیشن

- بدون هیچگونه چکه و نشتی
- قابلیت اتصال به آب یونیت
- داشتن مخزن 500 میلی لیتر اختصاصی جهت انتخاب مایع شستشو (می توانید از محلول های دارویی مثل H2O2 ، کلرگزیدین و یا از محلول هیپوکلریت سدیم برای درمان اندودنتیک استفاده کنید).
- دارای دکمه شستشوی داخلی خودکار (Flush Function)



سر قلم های متنوع و کاربردهای گوناگون

سطح سر قلم های مکترون از تیتانیوم نیتريد پوشيده شده و نسبت به سر قلم های موجود در بازار بسیار مقاوم و مستحکم تر می باشند.